



MAXIMED
Latin America

MAXITEST™
LINHA VAPOR

MAXITEST™

LINHA VAPOR › INDICADORES QUÍMICOS

Os **INDICADORES QUÍMICOS MAXXITEST** são monitores de uso interno, que promovem leitura qualificada das condições necessárias à esterilização no interior de embalagens, pacotes, caixas e contêineres que acondicionam os materiais e dispositivos médicos. Avaliam de forma completa e integrada todas as variáveis críticas do ciclo de esterilização (qualidade de vapor, tempo e temperatura de exposição). E cumprem todos os requisitos de desempenho e qualificação contidos na norma ABNT NBR ISO 11140-1.



ACESSE O VÍDEO



INTEGRADOR (TIPO 5) MAXITEST™

A versão **INTEGRADOR (TIPO 5)** possui desempenho similar ao do indicador biológico, acompanhando a curva de morte de uma população teórica de *Geobacillus stearothermophilus*, cuja correlação contempla os ciclos de 121°C, 127°C e 134°C.

EMULADOR (TIPO 6) MAXITEST™

Na versão **EMULADOR (TIPO 6)** destaca-se a precisão na leitura dos parâmetros críticos dos ciclos de esterilização em 121°C por 20 minutos e 134°C por 4 minutos.







MAXITEST™

LINHA VAPOR › INDICADORES QUÍMICOS

COMPOSIÇÃO E RESULTADOS:

Confeccionados em tiras de papel grau médico, laminadas frente e verso e impressas com fórmula química termocrômica reagente ao vapor saturado e guia de interpretação de resultado impresso nas próprias tiras. A leitura de resultado por mudança de cor simplifica a interpretação.

Tanto o **INTEGRADOR QUÍMICO MAXXITEST TIPO 5** quanto o **EMULADOR QUÍMICO MAXXITEST TIPO 6** possuem validade de 3 anos a partir da data de fabricação e são produtos isentos de registro junto à ANVISA, conforme RDC 185/2001.

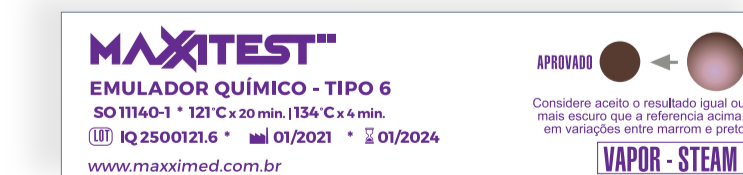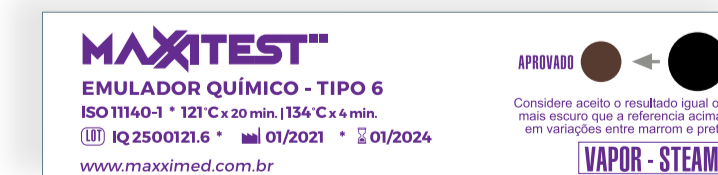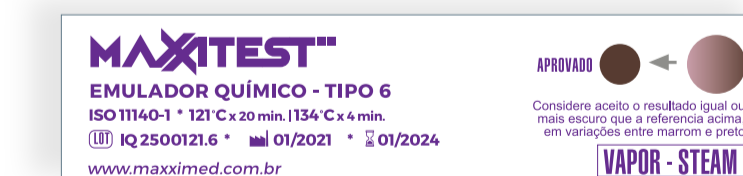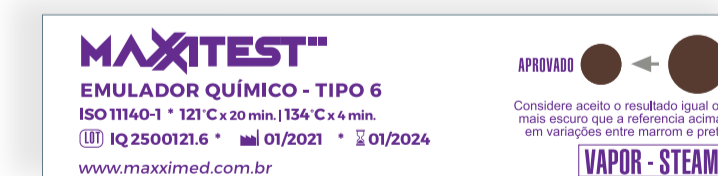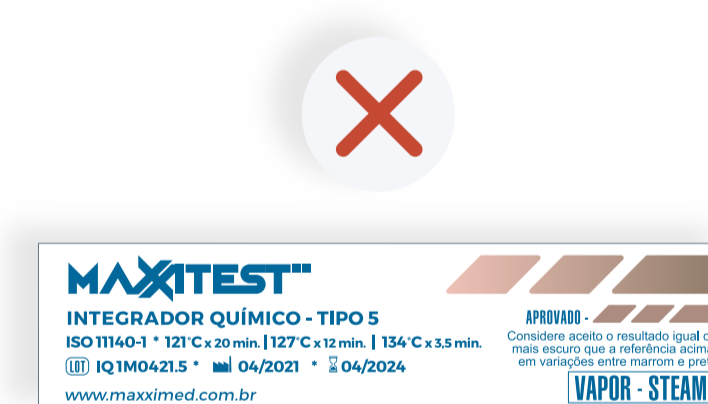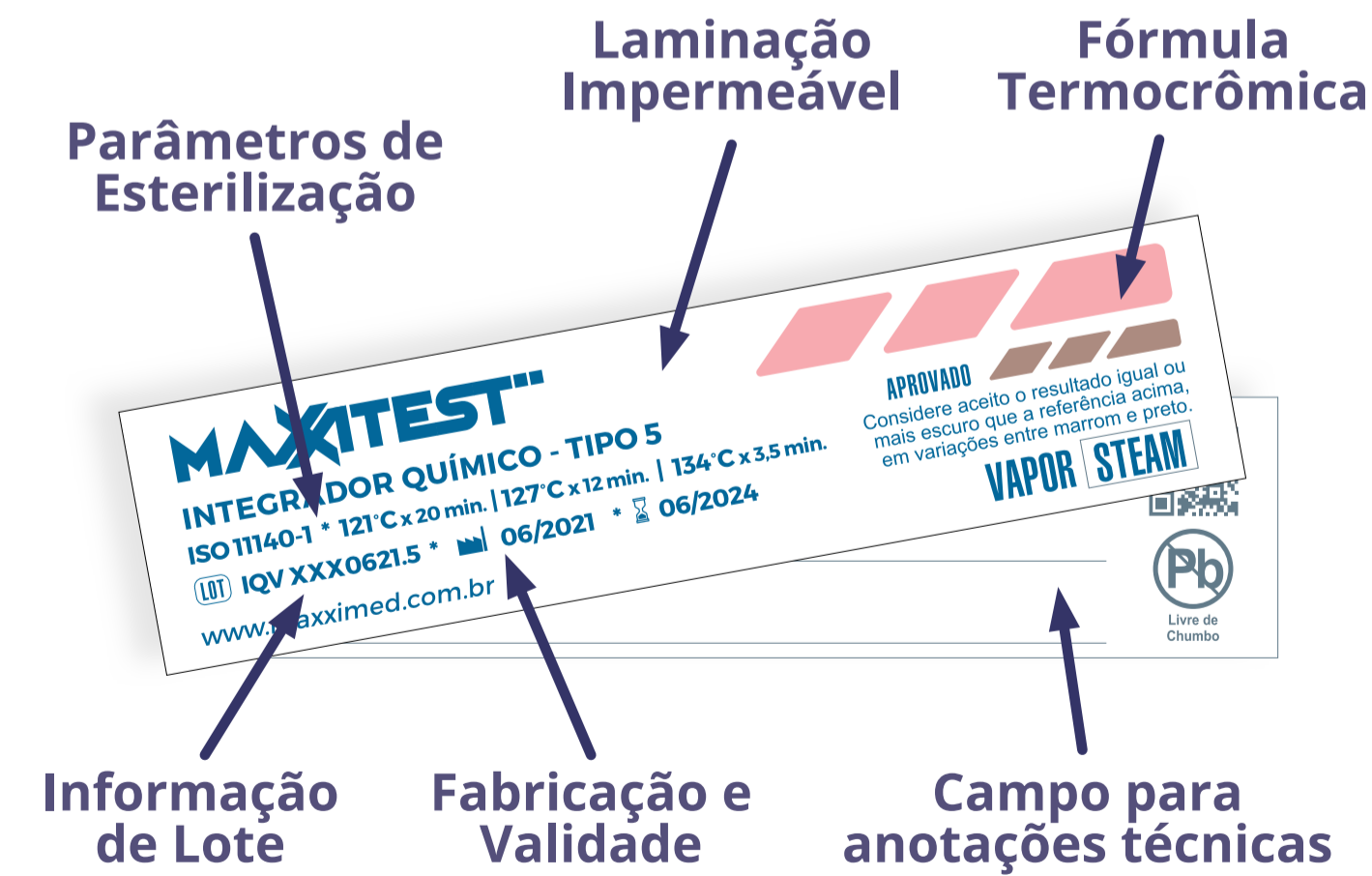

MAXIMED

www.maxximed.com.br



TEMOS
ORGULHO
DE SER
BRASILEIROS



VISITE NOSSO SITE